

Guide rapide

Connexion du Phonak ComPilot à un ordinateur à l'aide de l'adaptateur Sennheiser BTD 500, RÉF : 076-0856

Introduction

Ce document décrit comment connecter simplement votre Phonak ComPilot via Bluetooth à votre ordinateur pour, par exemple, passer des appels avec Skype, ou écouter de la musique avec vos aides auditives.

Remarque : cette installation ne modifiera pas négativement la configuration Bluetooth existante sur votre ordinateur.




Adaptateur USB Sennheiser

Préparer les appareils pour la connexion initiale


Suivez ces étapes pour jumeler votre Phonak ComPilot avec l'adaptateur USB.




Appuyez sur les deux boutons, comme illustré, pendant 2 secondes...

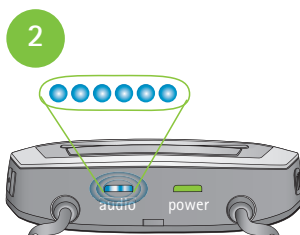


...jusqu'à ce que le témoin audio lumineux clignote rapidement en bleu.

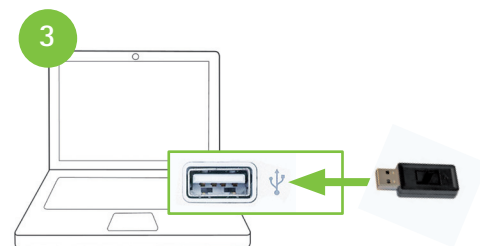

Insérez ensuite l'adaptateur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.

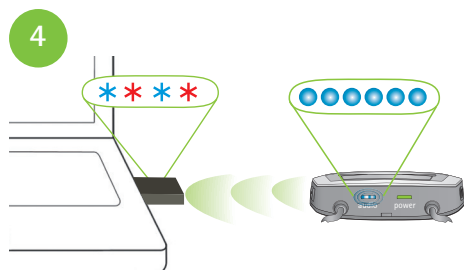

Le jumelage s'effectue automatiquement.

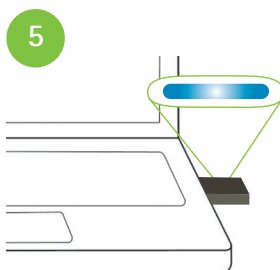

Le jumelage est terminé lorsque l'adaptateur USB affiche une lumière bleue continue.



À présent, le ComPilot se connectera automatiquement à votre ordinateur lorsqu'il sera à portée (10 m/30 ft) et sous-tension.


Remarque : Au cas où l'adaptateur USB ne clignote pas en rouge/bleu : retirez-le, réinsérez-le pendant 2 secondes, puis retirez-le et réinsérez-le à nouveau.

L'état de l'appareil est indiqué par différents témoins lumineux

	jumelage	connecté	diffusion
Adaptateur USB	* * * *	— — — —	— — — —
ComPilot	o o o o o o	o o o	— — — —

Configurer l'ordinateur


Quelques étapes simples sont nécessaires pour définir l'adaptateur USB/le ComPilot comme appareil par défaut.

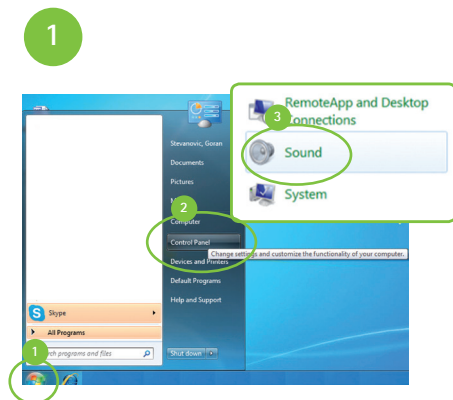


1. Ouvrez le menu Démarrer Windows.
2. Cliquez sur [Panneau de configuration]
3. Sélectionnez [Son]




1. Sélectionnez [USB BTD 500]
2. Cliquez sur [Définir par défaut]

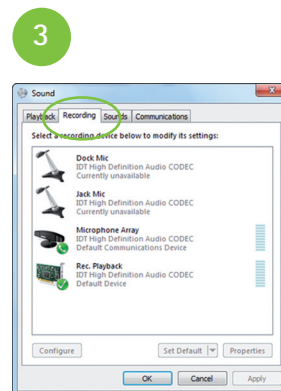

Cliquez sur l'onglet [Enregistrement]

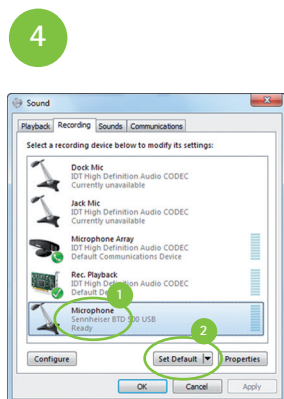

1. Sélectionnez [USB BTD 500]
2. Cliquez sur [Définir par défaut]

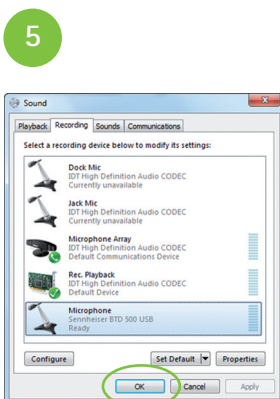

Cliquez sur [OK]
Le système peut désormais être utilisé.



Une fois que l'adaptateur USB BTD 500 est jumelé avec votre ComPilot et défini par défaut, il se connectera toujours automatiquement dès que votre ComPilot sera à portée et sous-tension.

Pour en savoir plus sur l'adaptateur USB BTD 500 (par ex., le jumelage avec un autre appareil Bluetooth), veuillez consulter le mode d'emploi Sennheiser à l'adresse : www.phonak.com/compilot

Écouter de la musique ou utiliser Skype

Écouter de la musique

1



Écoutez votre musique préférée avec le lecteur multimédia de votre ordinateur.


Le son est diffusé directement dans vos aides auditives.

2



Lisez/mettez en pause votre musique ou réglez le volume en utilisant les commandes du lecteur multimédia sur votre ordinateur...


3

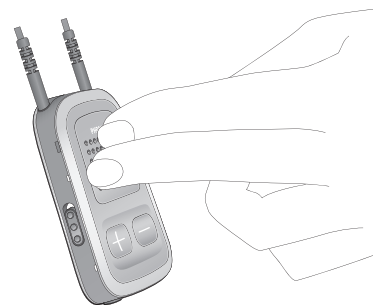

...ou appuyez sur le bouton principal du Phonak ComPilot pour mettre en pause/ reprendre la lecture du lecteur multimédia.

Appels via Skype ou un autre VoIP

1

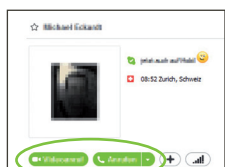


Passez ou recevez des appels Skype en utilisant les fonctions et les boutons Skype sur votre ordinateur.

2



Réglez le volume en utilisant le contrôle du volume Skype.

3

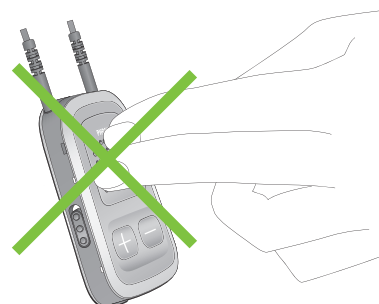

Le bouton principal du Phonak ComPilot n'appelle aucune fonction pendant un appel.